

Anleitung 3



c) DIE ANWENDUNG EINES AED BEI DER WIEDER-BELEBUNG

1

AED holen lassen.



Nur wenn eine zweite Person vor Ort ist, diese einen AED holen lassen.

Herzdruckmassage **sofort** beginnen und diese **nicht verzögern**.



AED-Standort mit Rettungszeichen markiert.

AED aus Wandkasten entnehmen. (Achtung: teils alarmgesichert)

2

AED einschalten & Anweisungen folgen.




AED abstellen. Deckel öffnen oder ON-Knopf drücken.

Anweisungen folgen, Oberkörper freimachen.



Die Klebefläche sollte... **trocken und unbehaart** sein.

Elektroden aufkleben. (Abbildungen auf den Elektroden befolgen).

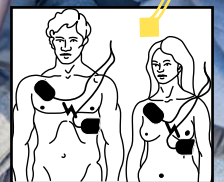

3

Analyse abwarten und Schock auslösen. (falls empfohlen)



„Achtung: Person nicht berühren, Schock.“

Abstand sicherstellen: Bei Schockabgabe keine Berührung mit dem Körper des Betroffenen.



Zügig den Schock auslösen und Herzdruckmassage (+ ggf. Beatmung) anschließend **sofort** weiterführen.

Achtung: Manche AED lösen den Schock automatisch nach einem Countdown aus.

Ein AED ist sicher und löst eine Defibrillation nur aus, wenn der dafür notwendige Herzrhythmus vorliegt (wie ein Kammerflimmern).

Du willst dein Wissen überprüfen?

Scanne den QR-Code oder folge dem Link.

[AED Mystery: Was stimmt, was nicht?]

[HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/WATCH?V=P2NRUZYK520](https://learningapps.org/watch?v=P2NRUZYK520)



[Inside AED: Das AED Zubehör kennenlernen]

[HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/WATCH?V=PRANBSEY320](https://learningapps.org/watch?v=PRANBSEY320)

